

MEDISANA®

BS 430 CONNECT
BS 440 CONNECT



Kehaanalüüsi funktsiooniga
kaal Bluetooth-iga



CE

Art. No. 40422 / 40423

Kasutusjuhend



OLULINE TEAVE! HOIDA ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS!

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see tuleviku tarbeks kindlas kohas alles. Kui annate seadme edasi teisele isikule, on oluline jälgida, et ka kasutusjuhend kaasas oleks.

- Seadet võib kasutada ainult koduses majapidamises.
- Seadet võib kasutada ainult alla 180 kg kaaluv inimene.
- Seade ei sobi kasutamiseks rasedatele.
- Kuna läbi keha jookseb elektrivool, ei tohiks lapsed keha analüüsi funktsiooni ohutuse huvides kasutada. Seejuures võivad nad ennast niisama muretult kaaluda.
- Seade ei sobi kasutamiseks südamestimulaatorite- või muude meditsiiniliste implantaatidega inimestele. Keha rasvasisalduse näit võib olla ebatäpne diabeedi või muude meditsiiniliste/füüsiliste näidustuste tõttu. Sama kehtib ka väga treenitud sportlaste kohta.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, seda on kahjustatud või vette kastetud.

Libisemisoht!



Ärge seiske kaalul märgade jalgadega. Ärge seiske kaalul sokkides vms. Ärge asetage kaalu ebatasasele pinnale. Kaaludes ärge seiske seadme nurgal/servadel.

Seiske kaaludes alati rahulikult seadme keskel, nii et kumbki jalg puudutab kahte elektroodi (vasak jalg kahte vasakpoolset ja parem jalg kahte parempoolset).

Lastele ohtlik!



Patareide allaneelamine võib olla surmav. Seetõttu hoidke patareid seade laste käeulatusest eemal. Kui patareid on alla neelatud, võtke viivitamatult arstiga ühendust. Hoidke pakendid lastest eemal. Need võivad põhjustada näiteks lämbumist.

Patareidega seotud ohud!



Patareid ei tohi muljuda, lahti võtta, tulle visata ega lühistada. Kui patareid lekib, vältige kokkupuudet lekkiva vedelikuga. Loputage kõik kokkupuutunud piirkonnad ja pidage viivitamatult nõu arstiga. Patareid vahetades jälgige õiget polaarsust (+/-). Kasutage ainult sama tüüpi patareid (4x AAA, 1,5 V).

Kaitske patareid liigse kuumuse eest. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta või kui patareid on tühjad, eemaldage need seadmest. Sellega aitate vältida lekkimisest tulenevat ohtu.

Materjali kahjustamise oht!



Kaitske seadet niiskuse eest! Hoidke seadet vee eest.

Märja kaalu pind on libe. Hoidke seadme pind kuiv.

Ärge hoidke seadet kuumas keskkonnas ja kaitske seda tugeva päikesekiirguse eest.

Kaitske kaalu igasuguste löökide ja raputamise eest.

Ärge püüdke seadet muuta või lahti võtta.

Kõik parandustööd peab tegema kvalifitseeritud isik.

Põrand võib olla kaetud mitmesuguste värvide või kunstmaterjalidega ning neid hooldatakse erinevate hooldustoodetega.

Mõned nendest materjalidest sisaldavad aineid, mis mõjutavad ja pehmendavad seadme jalgu. Seetõttu asetage seadme alla mittelibisev alus. Ärge kasutage seadme puhastamisel tugevaid kemikaale ega puhastusvahendeid.



A) Tavaline kaalumine „pealeastumise“ funktsiooniga



- 1 Lihtsalt astuge **paljajalu** kaalule (sokkide jms.-ta).
- 2 Kuvatakse teie kaal.

B) Isiklike andmete salvestamine mälusse.

Kaal võib salvestada 8 inimese andmed, kõikides 30 mälu kohta (sugu, spordirežiim, kaal, vanus). Eelseadistatud väärtused on järgmised: Mees, 165 cm, 30 aastane, kg.



1 Vajutage „SET“- nuppu, kuni mälu koht vilgub ekraanil.

2 Valige soovitud mälu koht kasutades ▲/▼-nuppe.

Valiku salvestamiseks vajutage „SET“ nuppu. Jätkake vastavalt soo, sportlikkuse, pikkuse ja vanuse seadmisega.

4 Peale isiklike andmete seadistamist kuvatakse ekraanile „0.0“.

5 Seadistamise lõpetamiseks seiske lihtsalt **paljajalu** kaalule.


6 Ekraanile kuvatakse järgmised andmed:

- Kaal
- Rasvasisaldus
- Veesisaldus
- Lihasmass
- Luumass
- BMR (kalorivajadus)
- BMI

C) Ühendage kaal oma nutitelefoni*

*iOS: iPhone 4S ja hilisem, iPad 3 ja hilisem, Android: Seadmed, mis toetavad GoogleAndroid Versiooni 4,3 ja Bluetooth 4.0 tehnoloogiat

Sisestage oma isiklikud näitajad, nagu on kirjeldatud punktis B). Kaal ja nutitefon tuleb paarida kui *Bluetooth®* 4.0 /*Bluetooth®* Smart®. Paigaldage kehtiv VitaDock+ rakendus ja järgige juhendis kirjeldatud samme.

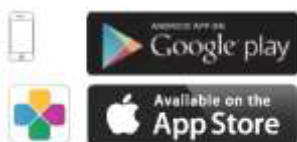

1 VitaDock+ rakendus on vabalt allalaetav rakenduste lehelt või Google Play lehelt.



2 Aktiveerige oma seadme iOS või Androidi *Bluetooth®*.

3 Käivitage rakendus. Veenduge, et internetiühendus (3G või WLAN) oleks stabiilne. Nüüd registreerige oma VitaDock konto.


Kui teil oma kontot veel ei ole, registreerige see nüüd tasuta VitaDock online.



4 Tõksake „E“ sümboolile rakenduse vasakul pool, et siseneda rakenduse **sätetesse**



- 5 Valige „Personal settings“. Sisenege oma isiklikesse sätetesse ja puudutage lõpetamisel „Save“. See toob teid tagasi almenüüsse

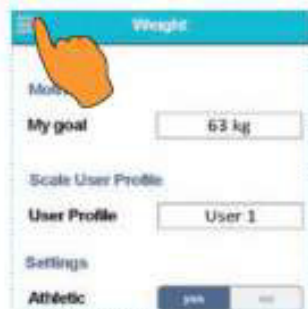


- 6 Toksake uuesti sümbolil "E" vasakul, ja valige nüüd „Weight“ ning sisestage oma andmed. Lõpuks klõpsake "Save".



- 7 Nüüd valige paremalt ülevalt sümbol „0“ See viib teid „My device“ menüüsse


Telefoni/tahvelarvuti ja kaalu ühenduse stabiliseerimiseks vajutage SET - nuppu ning **valige oma mälu**koht, mille olete sarnaselt **määranud**. Seiske kaalul **paljajalu** (sokkide jms.-ta) ja jälgige mõõtmise lõppemist (kinnituseks kõlab lõpetamisel piiks).

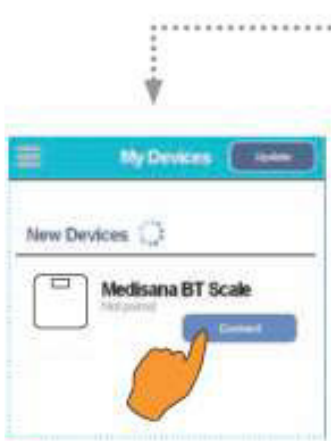

- 9 Näidud ilmuvad peale piiksu „My device“ rakenduse menüü ilmumisel

OLULINE: Sisestage isiklik algkaal. **Rakenduse profiilis valitud kaal peab vastama**


- 10 Nüüd valige sinine nupp „Connect“ kuvatut „Medisana Analysis Scales“ kõrval. **Märkus:** Kui kaal on juba teie mobiiltelefoniga paarditud, on nupp roheline

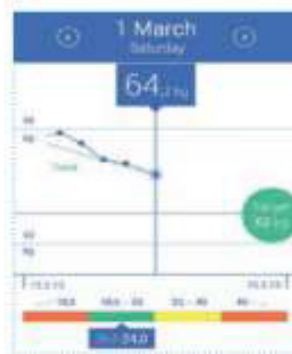

- 11 Mõõtmiste andmed kantakse automaatselt üle ja salvestatakse VitaDock+ rakendusse

Märkus Kui mõõtmise rakendusse andmeid üle ei kanta, korrake mõõtmist.
Märkus Kaalu sünkroniseerimiseks rakendusega on vajalik stabiilne internetiühendus.


D) Kaalu mõõtmine kasutades teie nutitelefoni ja VitaDock+ rakendust

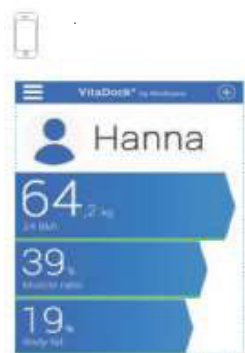

- 1 Käivitage rakendus.



- 2 Seiske kaalul **paljajalu** (sokkide jms.-ta) ja jälgige mõõtmise lõppemist (kinnituseks kõlab lõpetamisel piiks).

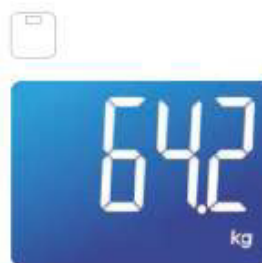

- 3 Ekraanile kuvatakse järgmised andmed:

- Kaal
- Rasvasisaldus
- Veesisaldus
- Lihasmass
- Luumass
- BMR (kalorivajadus)
- BMI (kehmassiindeks)



- 4 Nüüd valige sümbol „0“ paremal üleval. Nüüd valige roheline nupp „Connect“ „Medisana Analysis Scales“ kõrval.
5 Mõõtmiste andmed kantakse automaatselt üle ja salvestatakse rakendusse

GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamishendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - kohvimasina küttekeha ummistused
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtmepestiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 2 aastat
- Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

HOOLDUSPARTNERID

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Speleta	Akadeemia tee 20	tel. 654 6543
TARTU:	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel/faks 7 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel/faks 44 27 231
HAAPSALU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3	tel. 43 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
	OÜ Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. (45) 31 627
KÄRDLA:	FIE Enno Tuulik	Vabaduse tn.8, Kärdla	tel. 46 963 06
VÕRU:	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
IDA-VIRUMAA:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318

TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: _____

MUDEL: _____

KAUPLUS _____

MÜÜGIKUUPÄEV: _____

KAUPLUSE PITSAT: _____